


# MEDICAL ASSISTANCE TOILET SEAT

  
TO VIEW THE  
INSTALLATION VIDEO VISIT:  
[www.centoco.com/resources-videos.php](http://www.centoco.com/resources-videos.php)  
OR SCAN QR CODE



INSTALL  
SEAT IN  
UPRIGHT  
POSITION

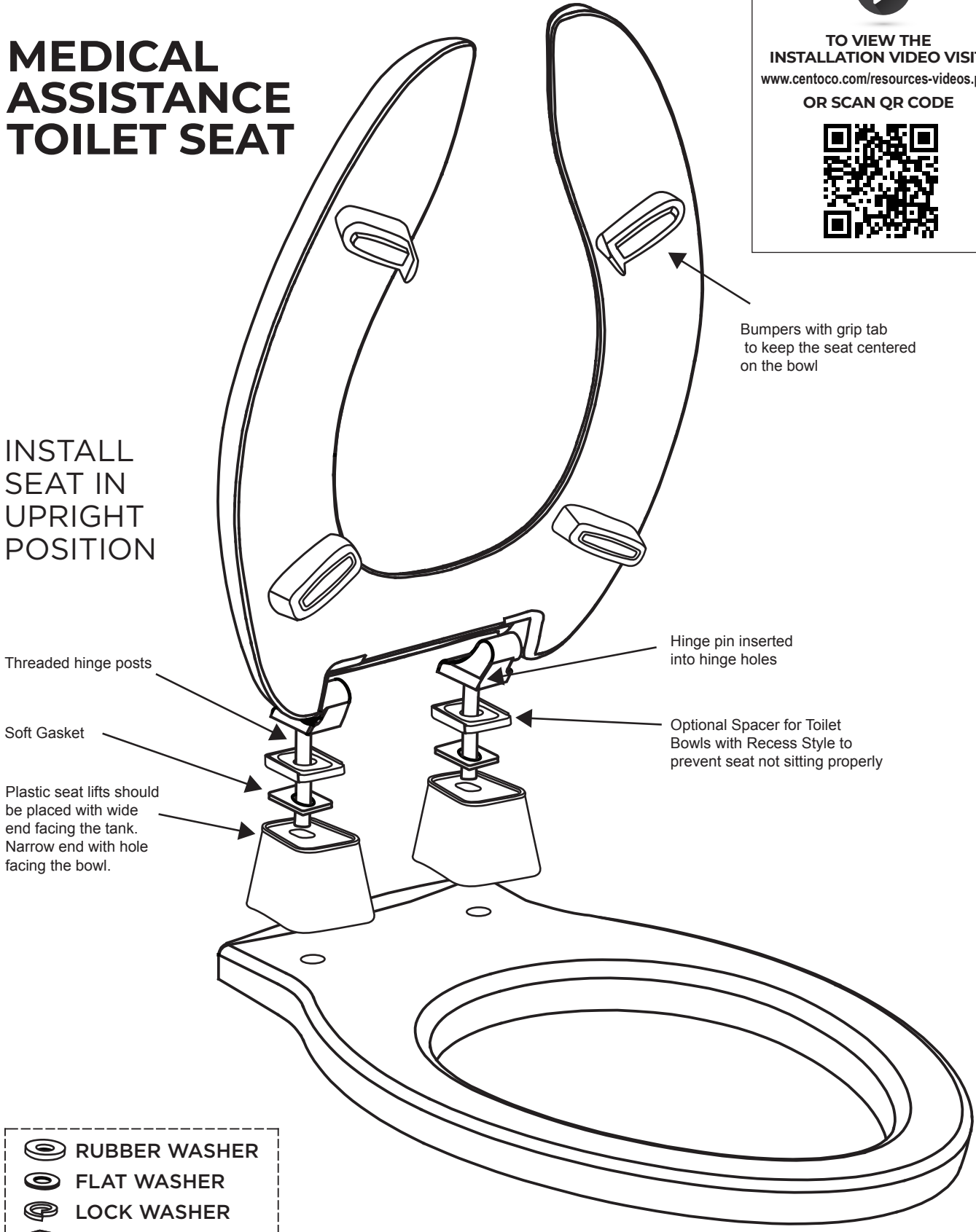

Bumpers with grip tab  
to keep the seat centered  
on the bowl





Threaded hinge posts

Soft Gasket

Plastic seat lifts should  
be placed with wide  
end facing the tank.  
Narrow end with hole  
facing the bowl.

Hinge pin inserted  
into hinge holes

Optional Spacer for Toilet  
Bowls with Recess Style to  
prevent seat not sitting properly

-  RUBBER WASHER
-  FLAT WASHER
-  LOCK WASHER
-  HEX NUT

# Medical Assistance Toilet Seat

Centoco medical assistance toilet seats are ADA compliant and designed to assist those with disabilities or limited mobility. Once installed these seats are elevated 2" - 3" allowing for less pressure on the knees. A higher toilet seat can also assist with the transfer from a wheelchair to the toilet by raising the toilet seat to a level closer to that of the wheel chair.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

**NOTE: INSTRUCTIONAL VIDEO AVAILABLE ON YOUTUBE AND WWW.CENTOCO.COM**

Tools: you will need a 9/16" or adjustable wrench to complete the installation

1. Insert the hinge pins into the hinge holes of the toilet seat.
2. Place the optional spacer if required and soft gasket on the threaded hinge posts.
3. Place the plastic seat lifts into position over the bolt holes on the toilet.
4. Holding the hinge pins and hardware in place, put the seat in an upright position and slide the hinge posts through the holes in the plastic lifts and toilet bolt holes.
5. From the underside of the bowl place the soft round washer, metal round washer and metal lock washer on the hinge post and start to thread the bolt on manually. Finish tightening with the 9/16" or adjustable wrench until firmly secure.
6. Repeat on the opposite side.

Note that the inside bumpers may not touch the rim of the bowl depending on the model For maintenance we recommended periodically checking and re-tightening the nuts Please clean the seat with a soft, damp cloth and only use a mild soap.

To learn more about Centoco products, visit our new website at [centoco.com](http://centoco.com)

Manufactured in the U.S.A. & Canada

## Siège de toilettes pour l'assistance médicale

Les sièges de toilettes de l'assistance médicale Centoco sont conformes à l'ADA et conçus pour aider les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Une fois installés, ces sièges sont surélevés de 2 à 3 pouces, ce qui permet de réduire la pression sur les genoux. Un siège de toilettes plus élevé peut également faciliter le transfert d'un fauteuil roulant aux toilettes en élevant le siège à un niveau plus proche de celui du fauteuil roulant.

## LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

**NOTE : VIDÉO D'INSTRUCTION DISPONIBLE SUR YOUTUBE ET WWW.CENTOCO.COM**

Outils : vous aurez besoin d'une clé 9/16" ou d'une clé réglable pour compléter l'installation

1. Insérez les charnières dans les trous de charnière du siège des toilettes.
2. Placez l'entretoise optionnelle si nécessaire et le joint souple sur les montants filetés de la charnière.
3. Placez les sièges en plastique sur les trous de boulons des toilettes.
4. En maintenant les axes de charnière et les ferrures en place, mettez le siège en position verticale et faites glisser les axes de charnière à travers les trous des lèvepersonnes en plastique et les trous des boulons des toilettes.
5. Par le dessous de la cuvette, placez la rondelle ronde souple, la rondelle ronde métallique et la rondelle métallique de blocage sur le pivot et commencez à enfiler le boulon manuellement. Finissez de serrer avec la clé de 9/16" ou la clé réglable jusqu'à ce que vous soyez bien fixé.
6. Répétez de l'autre côté.

Notez que les pare-chocs intérieurs ne doivent pas toucher le bord de la cuvette selon le modèle Pour l'entretien, nous recommandons de vérifier et de resserrer périodiquement les écrous Veuillez nettoyer le siège avec un chiffon doux et humide et n'utilisez qu'un savon doux.

Pour en savoir plus sur les produits Centoco, visitez notre nouveau site web à [centoco.com](http://centoco.com)

Fabriqué aux États-Unis et au Canada

## Asiento de inodoro de asistencia médica

Los asientos para inodoros de asistencia médica Centoco cumplen con la ADA y están diseñados para ayudar a las personas con discapacidades o movilidad limitada. Una vez instalados, estos asientos se elevan de 2 a 3 pulgadas, lo que permite una menor presión sobre las rodillas. Un asiento de inodoro más alto también puede ayudar con la transferencia de una silla de ruedas al inodoro al elevar el asiento del inodoro a un nivel más cercano al de la silla de ruedas.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

**NOTA: VIDEO INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN YOUTUBE Y WWW.CENTOCO.COM**

Herramientas: necesitará una llave de 9/16" o ajustable para completar la instalación

1. Introduzca los pasadores de las bisagras en los agujeros de las bisagras del asiento del inodoro.
2. Coloque el espaciador opcional si es necesario y la junta blanda en los postes de la bisagra roscada.
3. Coloque los elevadores de plástico del asiento en posición sobre los agujeros de los tornillos del inodoro.
4. Sujutando los pasadores de las bisagras y los herrajes en su lugar, ponga el asiento en posición vertical y deslice los postes de las bisagras a través de los agujeros de los elevadores de plástico y los agujeros de los pernos del inodoro.
5. Desde la parte inferior de la cubeta, coloque la arandela redonda blanda, la arandela redonda metálica y la arandela de seguridad metálica en el poste de la bisagra y comience a enroscar el perno manualmente. Termine de apretar con la llave de 9/16" o con la llave ajustable hasta que esté firmemente asegurada.
6. Repite en el lado opuesto.

Tenga en cuenta que los topes interiores pueden no tocar el borde de la taza dependiendo del modelo Para el mantenimiento se recomienda comprobar y reapretar periódicamente las tuercas Por favor, limpie el asiento con un paño suave y húmedo y utilice sólo un jabón suave.

Para saber más sobre los productos Centoco, visite nuestro nuevo sitio web en [centoco.com](http://centoco.com)

Fabricado en EE.UU. y Canadá



Centoco Manufacturing LLC: 809 E. Fifth Street, McCrory, Arkansas, USA, 72101  
Centoco Plastics Ltd.: 2450 Central Avenue, Windsor, Ontario, Canada N8W 4J3

1.800.265.3666